

**MOPEDIA®**

**BANCO DE BANHO**

---

**Manual DE INSTRUÇÕES**

## ÍNDICE

1. CÓDIGO .....	PAG.3
2. INTRODUÇÃO .....	PAG.3
3. USO PRETENDIDO .....	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE .....	PAG.3
5. Avisos gerais .....	PAG.4
6. SÍMBOLOS .....	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL .....	PAG.4
8. MONTAGEM .....	PAG.5
9. ANTES DE USAR .....	PAG.5
10. PRECAUÇÕES DE USO .....	PAG.5
11. COMO USAR .....	PAG.6
11.1 Ajuste de altura .....	pag. 6
12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO .....	PAG.6
12.1 Limpeza .....	pag. 6
12.2 Desinfecção .....	pag. 6
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO .....	PAG.6
14. RECURSOS TÉCNICOS .....	PAG.6
15. GARANTIA .....	PAG.7
16. REPARAÇÃO .....	PAG.7
16.1 Reparação de garantia .....	pag. 7
16.2 Reparação não coberta pela garantia .....	pag. 7
16.3 Dispositivo não defeituoso .....	pag. 7
17. PEÇAS SOBRESSALENTES .....	PAG.7
18. CLÁUSULAS ISENTAS .....	PAG.7

**CE** Dispositivo Médico classe I  
REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO  
de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

## 1. CÓDIGO

**Banco de banho** de transferência RS834

## 2. Introdução

Obrigado por ter comprado um produto de banho MOPEDIA pela gama de produtos Moretti S.p.A. O manual deste utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência. Em caso de dúvidas, recomendamos que contacte o revendedor que o possa ajudar e aconselhar adequadamente.

NOTA: Verifique se alguma peça tem idades de transporte e teste antes de utilizar. Em caso de danos, não utilize o aparelho. Contacte o seu revendedor para obter mais instruções.

## 3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

A cadeira de banho da Moretti destina-se a desativar a assistência do paciente na banheira

### ATENÇÃO!



- Não utilizar o produto para um propósito não indicado neste Manual
- A Moretti S.p.A. declina todas as responsabilidades por quais consequências resultantes de uma utilização incorreta desta produto e de alteração não autorizada ao quadro fazer produto
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

## 4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencente ao grupo de CHUVEIRO - CADEIRAS DE BANHO cumpre as disposições do regulamento 2017/745 sobre dispositivos médicos de 5 de abril de 2017.

Para este efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em caixa não estéril.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido
6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da última produção de lotes.

**Nota:** Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que a Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

## 5. Geral Avisos

- NÃO utilize este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem, em primeiro lugar, ler e compreender completamente este manual de instruções. Se não conseguir compreender as advertências, precauções ou instruções, contacte um profissional de saúde, um revendedor ou pessoal técnico antes de tentar utilizar este equipamento, caso contrário poderão ocorrer ferimentos ou danos.
- Mantenha a cadeira de banho embalada longe de fontes de calor
- SERVIÇO LIFE - o limite de utilização do produto é definido pelo desgaste das peças
- Mantenha sempre as mãos e os dedos afastados das partes móveis para evitar ferimentos
- NÃO permita que as crianças brinquem ou operem a cadeira de banho
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

## 6. SÍMBOLOS


- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Código do produto                  |
|  | Identificação de dispositivo único |
|  | Marca CE                           |
|  | Fabricante                         |
|  | Lote                               |
|  | Leia o manual de instruções        |
|  | Dispositivo Médico                 |
|  | Condições de eliminação            |

## 7. DESCRIÇÃO GERAL




Transferir banco de banho. Armação de alumínio, assento e encosto em HDPE (polietileno de alta densidade). Ajustável em altura para uma melhor adaptabilidade. Pontas de borracha antiderrapante. Duas pernas com otários. Montagem sem ferramentas.

## 8. MONTAGEM

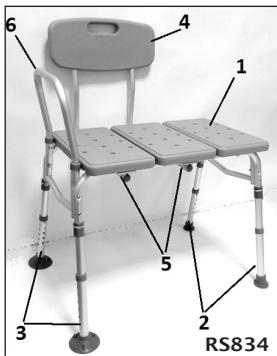

O produto é fornecido desmontado e que é fácil Para montarem o usar de qualquer ferramentas. Em o pacote você vai Encontrar:

- 1) Assento (2 pcs)
- 2) Pernas (2 pcs)
- 3) Pernas com ventosas (2 pcs)
- 4) Encostar (1 pc)
- 5) Tubos horizontais (2 pcs)
- 6) Apoio de braços /Suporte (1 pc)

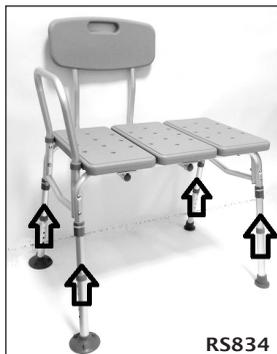

- Assem o conjunto das 4 pernas nos suportes do assento graças aos botões de pressão
- Se necessário, rode os pés de borracha para ter uma superfície de suporte correta
- Monte o apoio de braços no assento
- Combine o assento e o encader só de costas com os dois tubos horizontais.

## 9. ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verifique se a moldura está danificada para garantir uma utilização segura para pessoas e coisas
- Verifique a montagem correta do dispositivo

## 10. PRECAUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

O fabricante e o distribuidor não se responsabilizam pelas consequências de uma utilização indevida do produto.

- Sempre ajude o paciente com dificuldades de caminhada para se posicionar no assento
- Não utilizar com pacientes que excedam o peso máximo indicado na etiqueta colocada na estrutura do produto
- Evite movimentos repentinos durante o posicionamento
- Tenha cuidado em pisos molhados, em superfícies molhadas ou escorregadias, pode dificultar o posicionamento do paciente
- Não guarde o produto lá fora. Verifique periodicamente a estabilidade do produto e os parafusos de fixação corretos e o estado das proteções de borracha
- Em caso de dúvida para a utilização, o ajuste ou a manutenção do produto, contacte o seu revendedor

**ATENÇÃO!**

Não exceda a capacidade máxima de carga por qualquer motivo!

**11. COMO USAR****11.1 Ajuste de altura**

Pressione o pino para ajustar o assento, removendo o poste e colocando-o nos orifícios à altura desejada e à manobrabilidade do paciente. Volte a colocar a paragem no buraco para a trancar. Posicione o banco do banho de transferência de modo a que fiquem duas pernas do assento no fundo da banheira e duas no chão exterior. Verifique a estabilidade do assento antes de se sentar.

**12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO****12.1 Limpeza**

Para limpar a ajuda e a estrutura utilize uma solução de álcool e sabão neutro (em partes iguais) misturada com água.

**ATENÇÃO!**

Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcool, produtos de limpeza à base de cloro, desinfetantes e acetona durante um limpeza, porque estas substâncias causam um abrasão das superfícies plásticas e o enferrujamento das superfícies metálicas


A empresa de fabrico não pode ser responsabilizada pelos danos causados pela utilização de materiais que possam danificar a superfície do produto ou produtos químicos corrosivos durante a limpeza.

**12.2 Desinfecção**

Se for necessário desinfetar o produto, utilize um detergente neutro desinfetante comum.

**13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO**

Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que deite a cadeira de banho nas áreas de eliminação apropriadas para reciclagem.

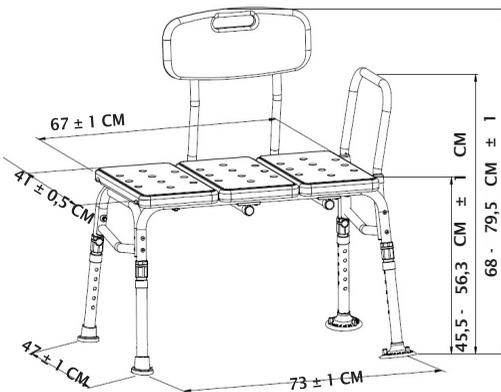**14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****RS834****\*DIMENSÃO:**

 L: 86 CM  W: 51 CM

 H: 88,6 ÷ 106,3 CM

**SESSÃO: 67 X 41 X H45,5 ÷ 56,3 CM**

**PESO: 5 KG**

**PESO MÁXIMO DE CARGA: 110 KG**

\* AS MEDIÇÕES REFEREM-SE ÀS DIMENSÕES GLOBAIS

## 15. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico por um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções de utilização não forem rigorosamente cumpridas. A utilização correta do aparelho está especificada neste manual.

A Moretti não se responsabiliza por danos pessoais ou causados por ou em relação a uma instalação errada ou a uma utilização indevida. A Moretti Moretti não garante os produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: desastre natural, manutenção ou reparação não autorizadas, danos devidos a problemas de alimentação (quando fornecidos) utilização de peças sobressalentes não fornecidas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, como indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a correta utilização do aparelho.

## 16. REPARAÇÃO

### 16.1 Reparação de garantia

No caso de um produto Moretti estar defeituoso em defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha pode ser coberta pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode reparar ou substituir o artigo sob garantia num revendedor Moretti ou na localização Moretti. O custo de mão de obra para a reparação pode ser cobrado à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. A reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

### 16.2 Reparação não coberta pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e de envio de uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor.

As reparações de produtos não abrangidos pela garantia são justificadas por seis (6) meses a contar da data em que recebe o produto reparado.

### 16.3 Dispositivo não defeituoso

O cliente será informado se, depois de ter examinado e testado o produto devolvido, a Moretti alegar que o produto não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, todos os custos de envio serão pagos pelo cliente.

## 17. PARTES SOBRESSELENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir da data de receção.

## 18. CLÁUSULAS ISENTAS

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de mercadoinsidade, adequação para um determinado fim, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, asisenções de responsabilidade e limitações desta garantia não podem ser-lhe aplicadas. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.





**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Inglés

Produto \_\_\_\_\_

Comprado em (data) \_\_\_\_\_

Retalhista \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Cidade/cidade \_\_\_\_\_

Vendido para \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Cidade/cidade \_\_\_\_\_



**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.e-mail.com morettispa:**

**info@morettispa.com MADE IN P.R.C.**

**MORETTI S. P.A.**  
Via Bruxelles, 3 -  
Meleto 52022  
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96  
21 11  
Um fax. +39 055  
96 21 200

www.  
morettispa.com  
info@morettispa.c  
om