




TÁBUA DE BANHO JAVA

REF.812176

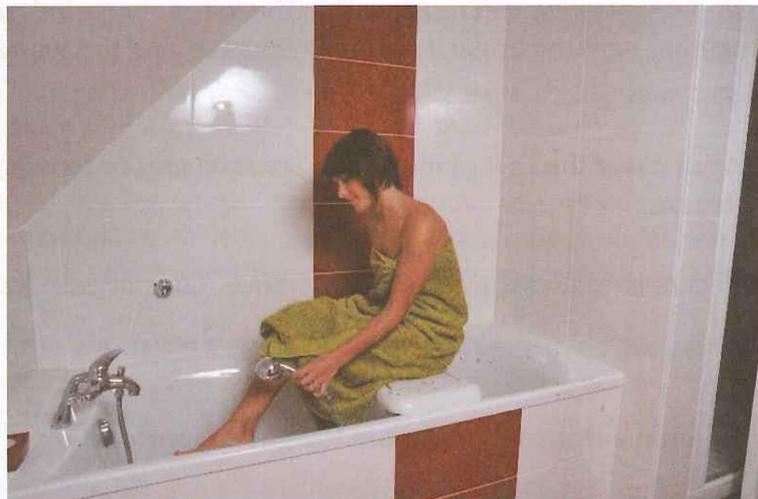

AVISO DE UTILIZAÇÃO – MANUAL DO UTILIZADOR

INTRODUÇÃO & RECOMENDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO


O objectivo da tábua de banho é fornecer um apoio ao utilizador que ainda possui um bom controle de tronco, mas que sofre um ligeiro desequilíbrio, ganham assim mais confiança e segurança para tomar o seu banho confortavelmente sentado.

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

Por favor, siga cuidadosamente estas instruções.

- - AVISO - importantes informações de segurança relativas ao risco de ferimentos graves.
- CUIDADO - informação para evitar danos no produto.
- NOTA - informações às quais deve prestar especial atenção.

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

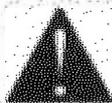

Por favor leia atentamente este documento antes de o utilizar. Não o fazer pode resultar em lesões graves.



Assegurar que todas as ligações são apertadas e seguras antes da utilização



Não exceda a capacidade máxima de peso indicada na sua Bancada ou Duche Conselho de Administração.



Antes de usar, verificar se os parafusos estão apertados e se o produto é estável.

O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES ACIMA MENCIONADAS PODE RESULTAR EM LESÕES GRAVES.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM/EQUIPAMENTO

1. Desaperte os suportes de montagem inferiores na parte inferior do painel da banheira ou duche rodando a perna no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Isto liberta o suporte de ajuste para permitir o ajuste a um tamanho de banho diferente.
2. Deslize os suportes até apontarem para o centro da banheira ou base de duche, depois coloque a banheira ou base de duche sobre a banheira, assegurando que existe largura suficiente para descansar em segurança na margem da banheira (ver FIG 1).

ADVERTÊNCIA

Evitar excessivos transbordos ou um risco de inclinação pode ocorrer (ver FIG 2).

3. Movimentar os ganchos para fora até que estejam posicionados positivamente na tábua e a tábua seja firmemente colocada na borda do banho de ambos os lados. Apertar os parafusos para fixar.
4. Verificar se o painel da banheira ou do chuveiro está seguro e estável antes da sua utilização.
5. O procedimento de montagem acima descrito deve ser realizado cada vez que a tábua de banho é colocada no banho para assegurar um posicionamento positivo.

1. Desaperte os suportes de montagem inferiores na parte inferior da tábua de banho, rodando a perna no sentido anti-horário. Isto liberta o suporte de ajuste para permitir a montagem em banheiras de tamanhos diferentes. Inverter esta acção para apertar.

2. Deslize os suportes até ao centro da tábua de duche, depois coloque a tábua de sobre a banheira, assegurando que há largura suficiente para a tábua descansar em segurança na borda da banheira (ver FIG 1).

ADVERTÊNCIA

Deve ser evitada uma saliência excessiva ou pode ocorrer um risco de inclinação (ver FIG 2).

3. Movimentar os parênteses para fora até estarem positivamente localizados no lado da banheira e a tábua estar firmemente para baixo na borda da banheira de ambos os lados. Apertar os parafusos para fixar.
4. Verificar se a tábua está segura e estável antes de usar.
5. O procedimento de encaixe acima deve ser efectuado cada vez que a tábua de banho é colocada sobre a banheira para assegurar uma localização positiva.

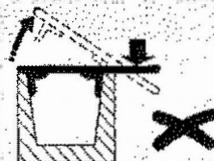
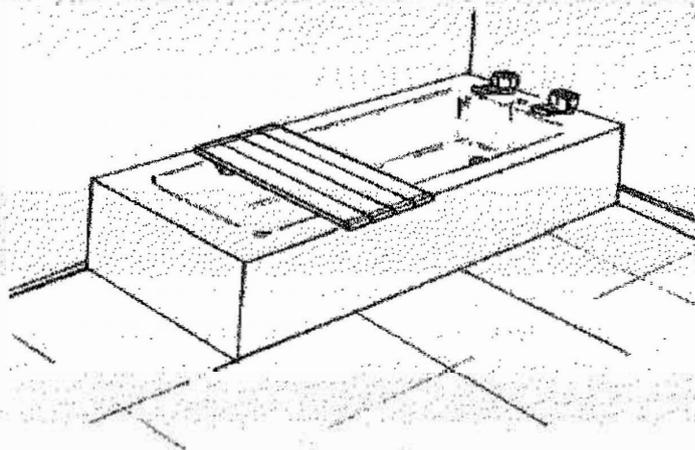


FIG. 2

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A Tábua de banho pode ser facilmente limpa com um detergente suave ou água morna com sabão. Enxaguar em água morna após a limpeza. NÃO utilizar detergentes abrasivos ou esfregões.

DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Por favor contacte o seu revendedor local

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para facilidade de transferência e segurança acrescida, este modelo de tábua de banho de plástico é fornecido completo com pega. Proporcionando uma confortável zona de assento com contornos para sentar enquanto toma banho, tem furos bem espaçados para uma melhor drenagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:		
	Comprimento	70 cm
Largeur	Largura	26/30 cm
Réglage de la longueur	Ajuste de comprimento	40.5 a 65 cm
	peso máximo do utilizador	113 kg

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO:

Este produto não pode ser reciclado e deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. A recolha e eliminação separada do seu produto ajudará a conservar os recursos naturais e a assegurar a sua eliminação de uma forma que proteja o ambiente. Assegure-se de que é o proprietário legal do produto antes de tomar medidas para a sua eliminação, de acordo com as recomendações acima referidas.

GARANTIA

O produto é garantido como isento de defeitos de materiais e de mão-de-obra. Esta garantia é limitada ao comprador original do consumidor.

Tem direito a uma substituição ou reembolso de um defeito grave e a uma indemnização por qualquer outra perda ou dano previsível. Também tem o direito de mandar reparar ou substituir os bens se os bens não forem de qualidade aceitável e se o defeito não for uma falha grave.

Para além de quaisquer direitos e recursos que possa ter ao abrigo de outras leis relacionadas com os bens, oferecemos-lhe a seguinte garantia :

1. Se durante os primeiros 24 meses de utilização a partir da data de compra, ou durante os primeiros 3 meses se os bens tiverem sido utilizados comercialmente (período de garantia), houver um defeito nos bens devido a mão-de-obra ou material inadequado, substituiremos o(s) bens sem encargos. Qualquer produto de substituição é garantido apenas durante o tempo restante no Período de Garantia original.
2. Não somos obrigados a substituir os bens ao abrigo da cláusula 1 se os bens tiverem sido utilizados, operados, reparados, danificados, abusados, instalados ou adulterados por pessoas não autorizadas, ou não tiverem sido mantidos de acordo com as instruções do fabricante. Se os bens consistirem em vários acessórios, podemos optar por substituir apenas o acessório defeituoso.
3. A garantia prevista na cláusula 1 é limitada apenas à substituição de bens. Na medida do permitido por lei, excluimos toda a responsabilidade :
 - (a) perdas ou danos consequentes ou quaisquer outras perdas ou danos a bens ou pessoas, independentemente da forma como tenham sido causados ;
 - (b) objectos quebráveis, tais como vidro e artigos de cerâmica
 - (c) danos em artigos consumíveis ; e
 - d) danos decorrentes do desgaste normal

4. Para reclamar sob garantia, deve, dentro do período de garantia, devolver a mercadoria ao local de compra, juntamente com a prova original de compra, e esta página de garantia incluindo os detalhes abaixo.
5. Esta garantia não cobre o custo de fazer pedidos de garantia ou transporte dos bens de e para o local de compra.
6. Esta garantia aplica-se apenas a bens adquiridos em França. Consulte o seu revendedor local para questões relacionadas com a garantia.



Peso máximo suportado
113 Kg



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

