

# SISTEMA DE ALERTA SEM FIOS

## Manual do Utilizador

Leia atentamente as instruções antes de utilizar. Instruções a manter.

O sistema de alerta sem fios (referência 25536) foi concebido para alertar quando uma pessoa está em apuros.

Para utilização como ajuda domiciliária ou em estabelecimentos multi-residentes com pendentes adicionais (referência 25537).

### Lista de itens incluídos na embalagem:

Uma base de carregamento.

Uma base portátil **recarregável**.

Alimentação da base: bateria recarregável (3,7V / 700 mAh) via cabo **USB**


2 pendentes.

Alimentação dos pendente: 1 pilha CR2032 (fornecido) x 2.

Um Cabo USB.

### Instalação e configurações

Retire o produto da sua embalagem e verifique se todos os elementos estão incluídos.

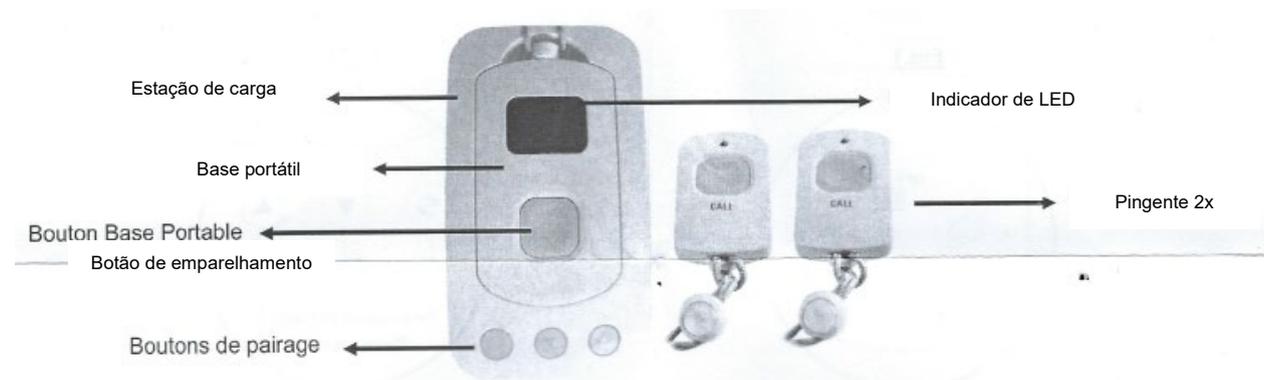

**Passo 1: Carregar completamente a base portátil antes da utilização.** O tempo de carga depende do nível da bateria da estação base portátil. O tempo de carga necessário é de aproximadamente uma hora (sem utilizar o alarme). A autonomia da base portátil depende da intensidade da sua utilização.

Inserir a ficha mini USB na ranhura na parte de trás do saco de carregamento e ligar a ficha USB a uma porta USB alimentada (adaptador USB, computador, etc.). Coloque a base portátil na base de carregamento. Um indicador LED vermelho aparece no visor. O indicador LED fica azul assim que a base está totalmente carregada.

### Passo 2: Emparelhar os pingentes e a base portátil.

Quando a base estiver completamente carregada, rodar o botão na parte de trás da base para a posição ON (como mostrado na Fig. 1). A estação de base emitirá um sinal sonoro. Colocar a base sobre o saco de carga e proceder ao emparelhamento dos pingentes.

O emparelhamento deve ser efetuado com a base colocada na base de carga e esta última ligada por fonte de alimentação. Os pendentes colocados ao lado. Este modo de definição é uma garantia para evitar o emparelhamento não autorizado quando não se usa a base portátil.

1. Na base, mantenha premido o botão "Emparelhamento" (como mostrado na Fig.2) até que o sinal sonoro seja ouvido. Na primeira utilização, o mostrador irá piscar por defeito a 01 e o indicador LED (vermelho e azul) irá piscar durante 30 segundos.
2. Seleccione o número desejado a ser atribuído ao pendente com a tecla Up ↑ e para baixo ↓ para percorrer os números.

3. Em seguida, premir e manter premido o botão no pingente para corresponder ao número seleccionado no passo anterior até o sinal sonoro soar. O sinal emite 4 bips rápidos para confirmar que o emparelhamento foi concluído. Durante o emparelhamento, o LED no pendente acender-se-á e depois desligar-se-á automaticamente.
4. Continuar e repetir os passos 2 e 3 para o segundo e subsequentes pingentes, no caso de pingentes adicionais. A base pode emparelhar até 45 pingentes.
5. Quando todos os emparelhamentos estiverem completos, premir o botão "Emparelhamento" (como mostrado na Fig. 2) para finalizar e o visor irá desligar-se.


**Aviso:** O tempo disponível para o emparelhamento é de 30 segundos. Se nenhum emparelhamento for feito durante este tempo, o indicador LED na unidade base desliga-se e o emparelhamento pára.

Ao retomar o novo emparelhamento no passo 1, o ecrã mostra o último número atribuído ao último pingente emparelhado.


**Atenção:** Ao emparelhar no passo 3, se o sinal emitir 2 bips distintos (e não 4 bips rápidos) significa que o pendente seleccionado já está emparelhado com o número seleccionado.

**Atenção:** Para apagar todas as definições e parâmetros armazenados e reiniciar o Sistema de Alerta Sem Fios: rodar o botão (localizado na parte de trás da unidade base) para a posição ON (como mostrado na Fig.1) e manter premido o botão "Reset" na parte de trás da unidade base portátil com um objeto muito fino até o sinal sonoro soar. O sinal emitirá 3 bips rápidos para confirmar que todas as definições foram apagadas.

**Fig.1**

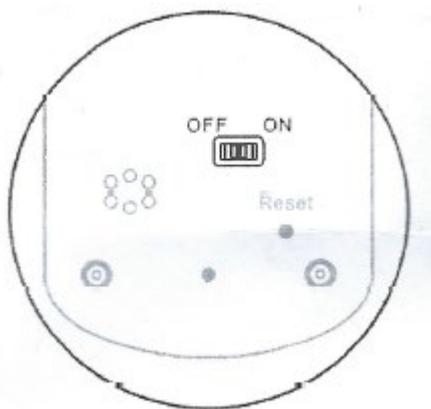

**Fig.2**

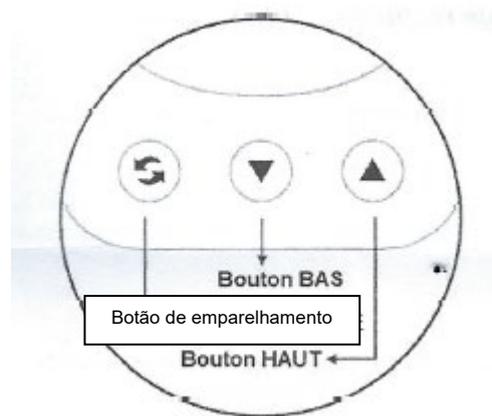

### **Passo 3 : Ajustar o volume do alarme.**

O volume do alarme da estação base portátil é ajustável. Colocar o botão (localizado na parte de trás da base) na posição ON (como mostrado na Fig.1) e manter premido o botão na base portátil até o visor mostrar L 1. Pressionar sucessivamente o botão para seleccionar o volume. A base permite 4 níveis de ajuste. O visor desligar-se-á após um atraso de dois segundos, se não for premido, e guardará o volume seleccionado.

### **Passo 4: Utilizar com um pingente de alarme 1.**

A estação base portátil pode ser utilizada no saco ou em modo móvel para receber alertas. Colocar o botão (localizado na parte de trás da base) na posição ON para receber alertas. Quando um utilizador carrega no botão no pingente, envia um alarme sonoro e visual para a base móvel:

- O ecrã apresentava o número correspondente à caneta dente.
- Vários sonares em bips repetitivos.
- O indicador LED (vermelho e azul) pisca.

**Atenção:** Esta informação é apresentada por um atraso de 20 segundos. Para parar o alarme, pressione o botão na base portátil.

Quando o alarme pára automaticamente após o atraso de 20 segundos, o visor desliga-se. O indicador LED azul na unidade base piscará a intervalos de 8 segundos para indicar que um pingente foi ativado, mas a informação não é identificada. Premir brevemente o botão na unidade base portátil para exibir o número do pingente. O LED azul apaga-se quando o número é afixado.

Resoluções dos problemas encontrados:

Defeitos encontrados	Soluções
A base não carrega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar se o cabo USB está devidamente ligado ao saco e a uma porta USB.</li> <li>- Verificar se a porta USB está ligada (adaptador de corrente, computador... ).-</li> <li>- Ligar a ficha USB a outra porta USB.</li> <li>- O botão pode ser ajustado para ON ou OFF durante o carregamento da base portátil,</li> <li>- - Verificar se a base está corretamente posicionada</li> </ul>
O emparelhamento não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rodar o botão na parte de trás da unidade base portátil para a posição</li> <li>- ON. O tempo limite de 30 segundos já passou.</li> <li>- Verificar se as baterias nos pingentes são novas e corretamente instaladas..</li> <li>- Verificar se a base é colocada sobre o saco.</li> </ul>
O pingente não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar se o LED amarelo no pendente se acende quando o botão é premido.</li> <li>- Verificar se as baterias são novas e correctamente instaladas. Trocar as pilhas.</li> <li>- Verificar se o pingente está correctamente emparelhado com a base portátil.</li> </ul>
A base portátil não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifique se a base de dados está carregada.</li> <li>Verifique se o botão está na posição ON.</li> <li>Verifique o volume de alarme.</li> <li>Verificar a distância operacional entre o pingente e a base.</li> </ul>

*Nota: Os produtos eléctricos e electrónicos no fim do seu ciclo de vida podem ter um impacto no ambiente e na saúde humana.*

*Não se desfaçam deles com o lixo doméstico, mas nos pontos de recolha designados.*

*As pilhas nunca devem ser deitadas fora ou incineradas, mas eliminadas de acordo com os regulamentos locais sobre resíduos químicos. Este produto é um produto compatível com WEEE e ROHS; ao eliminar este produto, observe os regulamentos locais*



**Aviso:** A distância operacional entre os pingentes e a base portátil é de 100 M. Esta distância pode ser modificada em função do ambiente do sistema de alerta.

#### **Passo 5: Utilize com alarme de pingente multi-pingente.**

Quando vários utilizadores carregam nos botões dos pingentes, envia um alarme sonoro e visual para a base portátil:

- Quando vários utilizadores carregam nos botões dos pingentes, envia um alarme sonoro e visual para a base portátil.
- São emitidos vários beeps repetitivos.
- Um sinal sonoro rápido indica a ativação de um novo pendente
- O atraso de 20 segundos é reiniciado quando um novo pingente é ativado.
- O indicador LED (vermelho e azul) pisca.

Para parar o alarme, pressionar o botão na unidade base portátil, para que o sistema considere o último número de pendente identificado. Então o indicador LED azul piscará a intervalos de 8 segundos para indicar que os pingentes foram ativados mas não identificados. Premir brevemente o botão na estação base portátil para percorrer os números pendentes anteriores que foram ativados pela ordem da sua ativação. O LED azul apaga quando todos os números tiverem sido afixados.

Quando o alarme pára automaticamente após 20 segundos, o visor desliga-se. O indicador LED azul piscará a intervalos de 8 segundos para indicar que os pingentes foram ativados mas não identificados. Premir brevemente o botão na estação base portátil para percorrer os números dos pendentes que foram ativados pela ordem em que foram ativados. O LED azul apaga quando todos os números foram vistos.

Atenção: Sistema de aviso deve permitir uma rápida identificação dos pingentes. Contudo, o indicador azul piscará durante um período de 120 minutos.

A base é portátil e pode ser colocada à volta do pescoço com o cordão ajustável.

#### **Passo 6: Indicador de bateria fraca.**

Quando o indicador LED amarelo no pingente se torna escuro ou não se acende quando o botão do pendente é premido ou a unidade base portátil não recebe um sinal de um pendente, a bateria do pendente está descarregada: mudar a bateria.

Utilizar uma chave de fendas Phillips para abrir o compartimento da bateria no fundo do pingente. Inserir uma nova bateria CR2032 e observar a polaridade correta (+ de frente para a tampa). Substituir corretamente a tampa e aparafusar.

Aviso: Ao trocar a bateria num pingente, o emparelhamento pode não ser mantido.

Na unidade base portátil, quando o indicador LED vermelho pisca a intervalos de 3 segundos, isso significa que a unidade base é descarregada. Carregar totalmente a estação base, tal como descrito no passo 1.

#### **Termos de Utilização e Segurança**

**Utilizar o sistema de alarme para o fim a que se destina.**

**Manter o produto afastado de zonas húmidas e fontes de líquido.**

**Não colocar o produto na água.**

**Não utilizar outros conectores para além dos fornecidos com o produto.**

**Não modifique a estrutura do produto e não o repare você mesmo.**

**O fabricante não é responsável por danos no produto devido a utilização ou manutenção imprópria. Manter fora do alcance das crianças.**