



APOIO DE BRAÇOS PARA SANITA LUMEX

Manual de Instruções
DISPOSITIVO MÉDICO

REF. 811075



SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante		Convite para consultar o manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Não tolera a humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, por favor contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.


Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele aconselhará e informará sobre a utilização mais apropriada para o seu caso.

Distribuidor: este manual de instruções deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

O suporte da sanita Lumex é um dispositivo médico. É um auxiliar técnico de casa de banho para idosos, deficientes, deficientes, feridos ou para aqueles que podem facilmente perder o seu equilíbrio. Permite-lhe sentar-se e levantar-se com total paz de espírito, descansando sobre os apoios de braços estáveis e seguros. Cabe sob a sua armação existente.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

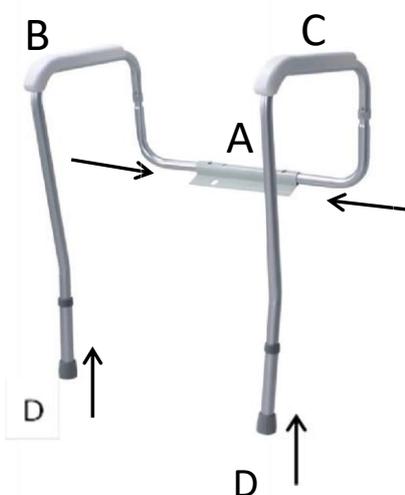

A : Placa de apoio
B : Apoio de braço direito
C : Apoio de braço esquerdo
D : Pernas ajustáveis

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA




A não observância das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Não exceder o limite máximo de peso de 110 kg;
- Certifique-se de que todas as peças são fornecidas em boas condições de funcionamento.
- Certifique-se de que o produto está devidamente instalado e travado na sanita antes de o utilizar.
- Se quaisquer peças estiverem danificadas, partidas, desgastadas ou em falta, contactar o concessionário.

MONTAGEM & UTILIZAÇÃO

1. Inserir os apoios de braços B e C nos pés D. Ajustar à altura desejada.
2. Fixar a placa de apoio A na mesma posição que a aba. (Utilizar os mesmos fixadores)

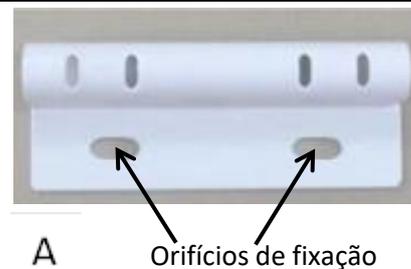

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidado e manutenção do seu produto pode resultar no risco de lesões graves.

- Limpar regularmente à mão o produto com um pano húmido e um detergente e desinfectante suave. Não utilizar produtos abrasivos, detergentes ou produtos à base de solventes.
- Secar com um pano limpo, seco e macio.
- Se o dispositivo estiver sujeito a utilização intensiva e/ou utilização num ambiente de múltiplos utilizadores, então recomendamos que a manutenção do dispositivo seja mais frequência
- Em caso de mau funcionamento, não repare o produto você mesmo. Consultar um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Deve primeiro ser limpo e desinfectado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. Antes disso, o produto deve ser inspeccionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tiver tornado inutilizável e tiver de o deitar fora: por favor contacte o seu revendedor especializado. Se desejar efectuar a reciclagem por si próprio, peça à sua empresa local de gestão de resíduos orientações para a eliminação.

ARMAZENAMENTO



A não observância das condições de armazenamento pode levar à deterioração do produto e, portanto, ao risco de lesões graves.

- Não armazene o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte de frio.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto :
- Num local seco e temperado
- Proteja o seu produto do pó, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Armazenar todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localizá-las, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos aquando da remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não colocar quaisquer objectos demasiado pesados sobre os elementos do produto, não encravar nada....).

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A esperança de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção para um utilizador. Para além deste período, o produto pode ser utilizado enquanto ainda estiver em boas condições.

Se o dispositivo for utilizado num ambiente de múltiplos utilizadores (como um lar ou hospital), então a vida útil pode ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura entre apoios de braço	Ajustável a partir de 46/50/54 cm.
Altura regulável	Altura ajustável a partir de 66 to 76 cm
Peso	1,6 kg
Peso máximo suportado	110 kg

GARANTIA

Este produto é garantido por dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. IDENTIDADES fornecerão peças de substituição para qualquer peça que se tenha partido devido a um fabrico, desenho ou deficiências de fabrico. Contacte o distribuidor a quem adquiriu o produto, no caso de necessitar de fazer uma reclamação. As falhas resultantes de danos acidentais, má utilização, alteração, ou desgaste não estão cobertas por esta garantia. Contacte o distribuidor a quem comprou o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



Peso máximo permitido
110 kg

