

REF 821059



MANUAL DO UTILIZADOR

INTRODUÇÃO :

Esta cadeira elétrica foi concebida para ajudar as pessoas a levantarem-se facilmente. A inclinação do encosto e do apoio para as pernas traz um conforto muito elevado em todas as posições

Por favor, leia o manual do usuário corretamente para uso ideal, especialmente as instruções de segurança.

Este manual deve ser disponibilizado para utilização posterior após a primeira leitura.

RESUMO

1. SEGURANÇA.....	3
2. CARACTERÍSTICAS:	4
3. MONTAGEM	5
4. UTILIZAÇÃO	6

• **SEGURANÇA :**

Cuidado

- A cadeira deve ser montada corretamente de acordo com as estruturas aqui descritas. O fabricante, seus agentes e distribuidores não são responsáveis por danos causados pela montagem inadequada da falha.
- A cadeira deve ser colocada num piso plano.
- Não utilize a cadeira num ambiente húmido ou poeirento. Deve ser usado em uma sala seca.
- "Não use em temperaturas acima dos 40°C.
- Não coloque a cadeira perto de radiadores, fogões ou outra fonte de calor. Evitar a exposição contínua à radiação solar.
- Não utilize a cadeira ao ar livre.
- Quando a cadeira não estiver em uso, desconecte o cabo de alimentação da fonte principal.
- Não descanse nem coloque um objeto pesado no apoio de braços, apoio para pés ou encosto da cadeira.
- Não pular ou saltar no sofá.
- Não durma na cadeira durante o seu funcionamento.
- As crianças devem ser supervisionadas por um adulto quando utilizam a cadeira, esta não se destina a crianças.
- Verifique se o tensão corresponde às especificações da cadeira.
- A fonte de alimentação deve estar em conformidade com os regulamentos locais.
- Não ligue nem desligue a tomada com as mãos molhadas.
- Para desligar a tomada, puxe-a pela ficha, não pelo cabo.
- Não colocar o cabo por baixo da cadeira para evitar danos na cadeira e curto-circuito.
- Não deixar pendurar o cabo de alimentação e o cabo de controlo remoto da cadeira.
- Se necessário, o cabo de alimentação pode ser substituído por outro cabo. O trabalho deve ser realizado por um técnico qualificado.
- Não utilize o telecomando com as mãos moldadas.
- Não deixar cair o controlo remoto.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo do controlo remoto.
- Não colocar os dedos ou as mãos entre o assento e o apoio de pernas, quando a cadeira estiver reclinada ou quando a cadeira estiver a ser movimentada. Esta cadeira deve ser utilizada de acordo com as instruções fornecidas.
- Este sofá não é para uso profissional.
- O fabricante, seus agentes e distribuidores não são responsáveis por danos pessoais ou materiais resultantes do uso indevido e abuso desta cadeira.

Nota: as reparações devem ser efetuadas por uma mão de obra qualificada ou pelo serviço pós-venda.

Cuidado

Use a cadeira em uma sala com uma temperatura moderada, não aumente a temperatura abruptamente. Recomenda-se aumentar a temperatura gradualmente para um nível normal. Caso a cadeira seja armazenada numa câmara fria, e seja levada para um local quente, é aconselhável usá-la uma hora depois, a fim de otimizar seu desempenho.

A cadeira não deve ser utilizada :

Nas seguintes condições, desligue a unidade imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. Se necessário, entre em contato com um profissional para a entrevista.

- Se a água for acidentalmente derramada na cadeira. Isto pode resultar num choque elétrico.
- Se os estofos estiverem rasgados e o mecanismo interno for visível.
- Se for detetada uma situação anormal ou mau funcionamento.
- Se houver uma falha de energia, existe um risco de avaria quando a energia é restaurada inesperadamente.
- Se houver uma tempestade com trovoadas.

! Nota: Verifique regularmente o estado do tecido.


- **CARACTERÍSTICAS:**

Comprimento total	97 / 171 cm	Peso da cadeira	49 kg
Largura total	85 cm	Carga máxima	125kg
Altura total	110 / 142 cm	Alimentação	100~240 V / 50 Hz
Profundidade do assento	52 cm	Revestimentos	PU ou poliéster de microfibras
Largura do assento	52 cm	Estrutura	Estrutura de madeira, estrutura de aço
Altura do assento	51cm		

- **MONTAGEM:**

A cadeira está embalada em 2 caixas. O encosto e o banco devem ser montados de acordo com as instruções dadas nas instruções de montagem.

Nota: Não monte a cadeira se os estofos ou partes da cadeira estiverem danificados. Verifique cuidadosamente todas as peças antes de montar a cadeira. Em caso de problemas, contacte o vendedor.

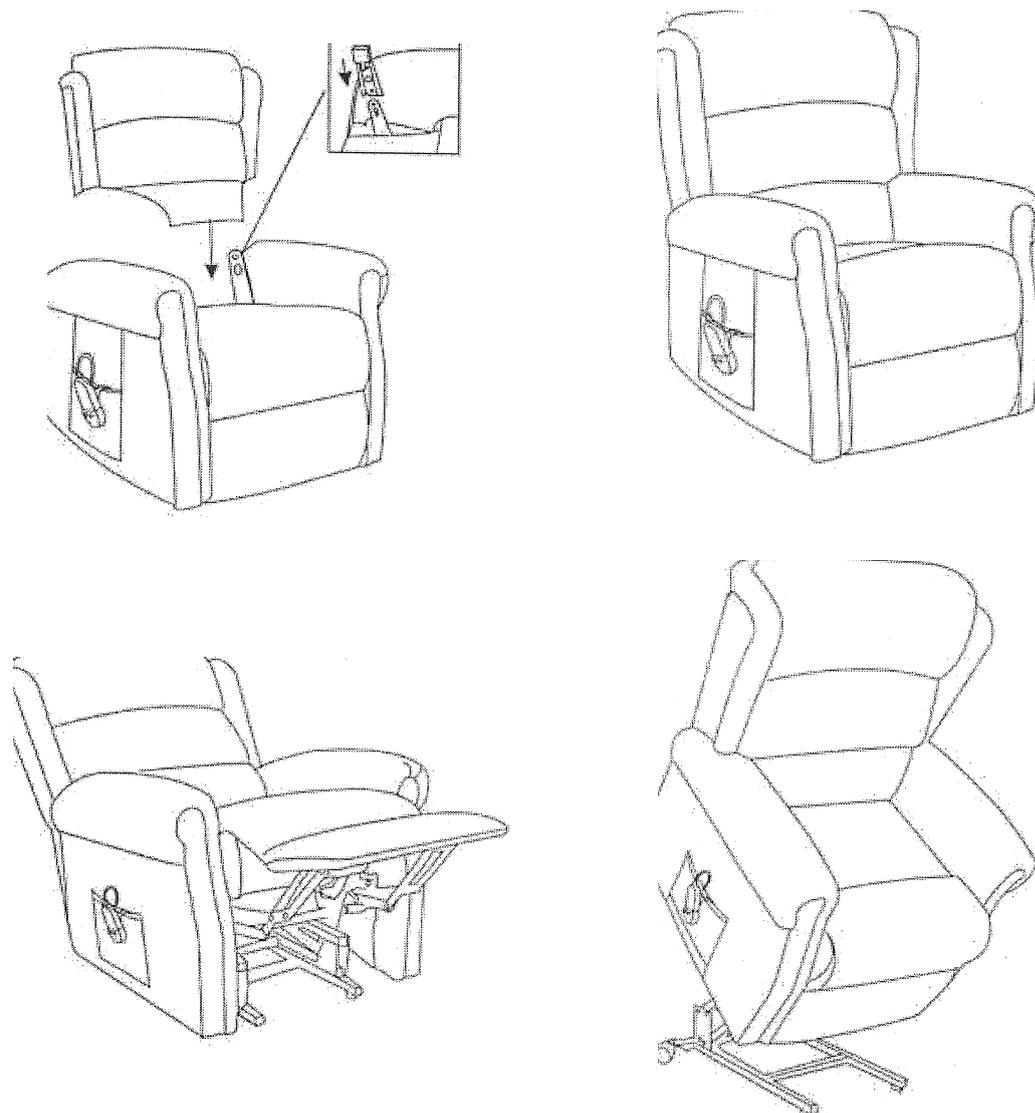

Nota: Certifique-se de que os fios estão ligados corretamente.

UTILIZAÇÃO :

- Proporcionar espaço suficiente à frente e atrás da cadeira para permitir uma inclinação adequada
- Coloque a cadeira sobre uma superfície plana e seca

Atenção:


- Certifique-se de que não há obstáculos na frente e atrás da cadeira antes da cirurgia.
- Não insira dedos ou objetos entre a cadeira e o apoio para os pés.

Controlo remoto

O controle remoto é equipado com 6 funções.

O movimento pára assim que o botão é libertado.

- 1 Baixar o apoio para as pernas e levantar a cadeira
- 2 Baixe a cadeira e levante o apoio para as pernas
- 3 Endireitar o sofá
- 4 Inclinação do sofá
- 5 Levanta a cadeira completa para a posição vertical
- 6 Inclina a cadeira completa para uma posição reclinável
- 7 Utilizar apenas um pano seco para a limpeza.

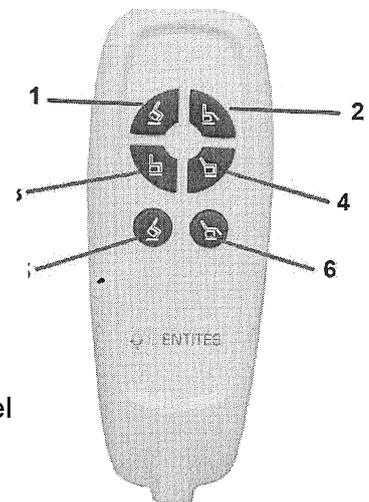

CUIDADO:

Não repare você mesmo. Contacte um especialista.

Dicas de cuidados de armazenamento :

- Mantenha a cadeira limpa e longe da humidade.
- Se a cadeira não for usada por muito tempo, cubra-a com pano limpo para protegê-la da poeira. Guarde-o numa sala seca.
- Não armazenar a cadeira sob luz solar directa ou em ambientes com temperaturas elevadas. Isto pode fazer com que o tecido se desvaneça.

Antes de limpar, assegurar-se de que o interruptor principal é desligado e a tomada é removida. Limpar o revestimento com produtos adequados. Nunca utilizar produtos à base de solventes.

IDENTIDADES

Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Te! 02 419618 48 - www.identites.eu

Vers. outubro de 2019

Fabricado na China - Importer by ADYS 330 allée des Hêtres F-69760 Limonest