



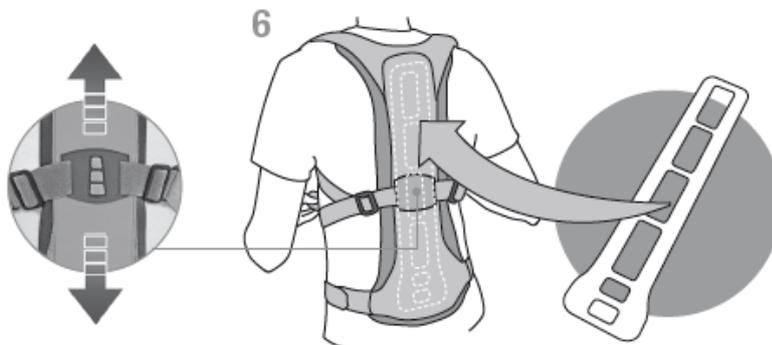

**EMO**  
especialistas  
en ortopedia

# Spineback

Ortesis dorsolumbar  
SPK108

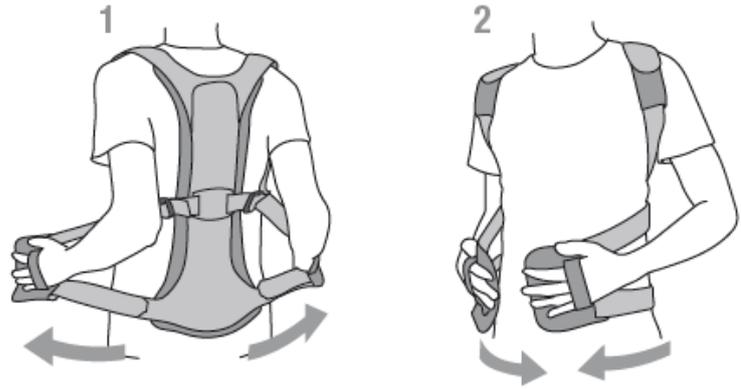

**ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.**  
Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) España  
[www.emo.es](http://www.emo.es) +34 963 132 051

V.1 05/2021

**CE**  
MADE IN SPAIN

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
2006AN48SS ATEX  
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

Caro cliente, obrigado pela confiança depositada no produto EMO. Escolhendo um par de Spineback on-line que você tenha adquirido um produto de qualidade e nível médico elevado para a saúde. Leia atentamente estas instruções. Se você tiver dúvidas contacte o seu médico ou o seu revendedor.

## REGULAMENTOS

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

## DESCRIÇÃO

### E CARACTERÍSTICAS

SpinebackBack SPK108: órtese tecido inelástico, leve e altamente respirável. Escapuloaxilares alças que facilitam ombros Retropulsão. Deslorsadora máxima contenção e de energia com o mínimo esforço. Facilmente adaptável ao masculino e anatomia feminina, tanto a nível da cintura quadril e. É acompanhada por uma virola de alumínio luz conformável para a peça de vestuário de forma rápida e facilmente incorporado cinto estendida loops para fácil colocação. Microvelcro por perto.

## EFEITO

Curva de correção da cifose. Ombros Retropulsão. Estabilização da coluna lombo-sacra. Compressão intra-abdominal.

## INDICAÇÕES

Lombalgia e dores nas costas. Estenose espinhal. Espondilólise. Espondiloartrite. Osteoporose. Doença degenerativa do disco. Processos degenerativos.

Hipotonia muscular.  
Fractura osteoporótica.  
Reabilitação postural.  
Pós-operatória.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

Coloque a cinta sobre a área lombossacral na altura correta para o uso. Tala em conformidade com a morfologia do paciente. Ajuda de pinos para os dedos para apertar e ajustar a peça sobre o abdômen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez alcançado o uso de compactação desejado. Agarrando o nível hipotensores laterais, passando pelos tensores cápsulas inferiores e puxe para regular a transferência de aperto e deslorsamiento lombossacral. Em seguida, defina a tensão em si mesmos. Subsequentemente passar os braços das duas espiras que formam cintas dorsais, puxar, passar através das cápsulas e fixar as extremidades em si mesmos. O posicionador dorsal está ligado por velcro na ortopedia e da móvel verticalmente para a melhor eficiência.

## PRECAUÇÕES

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. O material utilizado é hipoalergénico mas se qualquer reacção alérgica ou irritação ocorrer remover o produto e consulta do médico que prescreve. Em caso de pequenos aborrecimentos causados pela transpiração excessiva recomen-

damos usar uma camisa de algodão. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Em caso de dúvida na escolha do opt tamanho para o tamanho maior. Utilizar apenas durante os períodos de actividade. Reduzir a pressão abdominal durante o dia ou após as refeições breaks. Retirar durante o sono. A escolha correcta do tamanho apropriado para cada paciente é essencial para se obter o mais alto grau de eficácia terapêutica e prolongar a vida da órtese. O ajuste da órtese deve ser individual. O uso deste órtese é condicionado aos sinais de prescritor por isso deve ser utilizado para os fins indicados por ele. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas.

## LAVAGEM E MANUTENÇÃO

Lavagem das mãos com água quente (30° máximo) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tem Velcro, eles devem ser coladas ou mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Nenhuma loja ou ferro a roupa. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Não use água sanitária ou limpo e seco. Para seco coloque a peça e forte direta a uma fonte de calor direto. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.



## CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com as normas europeias aplicáveis são de alta

qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso. Certificado Öko-Text Standard 100: Têxtil rótulo ecológico concedido após a conclusão de um catálogo de análise de critérios que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas, em todos os materiais com os quais é feito um compromisso.

## GARANTIA

Ortopédica Especialidades Médicas S.L. garante a todos os seus produtos, desde que eles não tenham sido adulterados ou alterados e sempre no âmbito e termos de leis. Produtos cujas características foram alteradas devido ao mau uso não estão incluídos dentro desta garantia.

## AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.