

**CADEIRA DE BANHO GIRATÓRIA**  
*Manual de instruções - DISPOSITIVO MEDICO*

**REF. 812048 - 812174**



## SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

|   |                           |   |  |
|---|---------------------------|---|--|
|  | Endereço do fabricante    |  | Convite à consulta do manual do utilizador |
|  | Data de produção          |  | Siga as instruções de segurança            |
|  | Número de lote            |  | Conformidade CE                            |
|  | Referência do produto     |  | Dispositivo médico                         |
|  | Peso máximo do utilizador |   |  |

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

### IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar um dispositivo de assistência. Ele ou ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais adequado no seu caso.


Distribuidor: este folheto informativo deve ser administrado aos utilizadores deste produto.

### DESTINO DO PRODUTO

As cadeiras de banho giratórias são auxiliares técnicos. Destinam-se a ser utilizados para facilitar o acesso à banheira por parte de pessoas com mobilidade reduzida. Sem o uso de quaisquer ferramentas, o assento simplesmente repousa nas bordas da banheira e é fixado com dois estabilizadores laterais antiderrapantes. O seu assento abrangente está equipado com orifícios para facilitar a drenagem da água.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nota: Os braços são eleváveis para o 812048

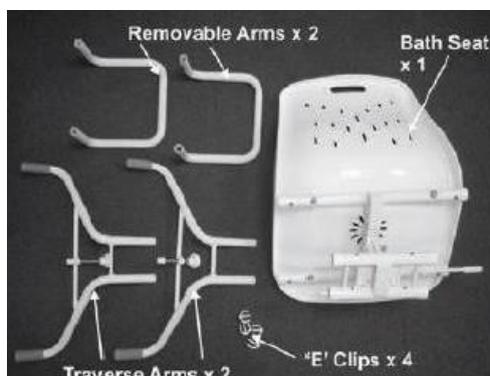

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

Não exceder o limite máximo de peso de 113 Kg.

Inspeccione todas as peças para verificar se há danos no transporte antes da montagem. SE houver danos no transporte, NÃO USE.

Contacte o seu concessionário para obter mais instruções.

Certifique-se de que todos os quatro clipe « E » estão totalmente instalados nos braços transversais.

Verifique se todos os quatro cantos do assento de banho giratório estão apoiados na borda superior do banho por pelo menos 5 cm (2 »). Verifique se os parafusos estão a tocar levemente no interior do banho. Não aperte demasiado os parafusos.

Sente-se sempre no centro do assento de banho giratório e não se apoie nas bordas do assento de banho, pois isso pode causar instabilidade. NÃO fique em pé sobre o assento de banho.

Se alguma peça estiver danificada, partida, desgastada ou em falta, contacte o concessionário.

### MONTAGEM

Para montar o assento:

1. Abra os apoios de braços para que fiquem virados para longe do encosto.
2. Levante a estrutura do assento e insira-a nos conectores de plástico a meio caminho das armações do braço - você vai ouvi-lo "clicar" no lugar.
3. Pressione o assento para baixo para conectá-lo à estrutura do assento - você ouvirá um clique no lugar. Certifique-se de que o assento está seguro antes de o utilizar.

## UTILIZAÇÃO

1. Levante a alavanca localizada por baixo do lado direito do banco e gire o banco. Solte a alavanca e continue girando o assento até que ele trave na posição.



2. Posicione o assento de modo que ele fique voltado para o usuário

3. O utilizador deve sentar-se com segurança no assento na posição acima. A alavanca giratória pode então ser acionada para permitir que o assento seja posicionado no banho (como mostrado). O utilizador agora pode tomar banho.

4. Depois de o utilizador se ter banhado, a cadeira pode ser girada para a posição virada para uma saída segura do banho.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e monitorização do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o assento de banho giratório ou chuveiro e seque-o após cada uso.
- Periodicamente, limpe o assento do banho com um pano húmido e detergente neutro ou desinfetante. Por exemplo, pode ser utilizado um desinfetante de cloreto suave (solução de 1000 partes por milhão).
- O assento de banho também pode ser limpo em sistema aquoso (por exemplo, uma máquina Turbex) até 80°C.
- Verifique se o assento do banho gira facilmente, suavemente e trava no lugar. Se o mecanismo de bloqueio não se sentir positivo ou se houver movimentos excessivos no dispositivo, retire da utilização e contacte o seu concessionário.
- Verifique se existem fissuras e danos no banhista, em particular no assento e tubo de plástico.
- Não utilizar em ambientes com mais de 60°C (saunas, por exemplo).
- Se houver uma avaria, não repare o produto sozinho. Consulte um revendedor autorizado.
- Lista de verificação :

Para manter o produto em boas condições, verifique antes de cada uso e verifique regularmente o seguinte:

| Confira o artigo  | A qualquer momento | Semanalmente |
|---|--------------------|--------------|
| Verifique o funcionamento do botão carregado com mola para permitir uma rotação de 90° do produto | X                  |              |
| Verificar o estado do banco   |                    | X            |
| Verifique a função e o estado dos apoios de braços  | X                  |              |
| Verifique se os suportes estão totalmente fixados às extremidades da banheira                     | X                  |              |

## MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo usuário. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

## RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

## ARMAZENAGEM



A inobservância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de prejuízo grave.

Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.

Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.

Observe as condições de armazenamento e arrumação do seu produto.

- Em lugar seco e temperado
- Proteja o seu produto embalando-o de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam demasiado pesados sobre os elementos do produto, não bloqueie nada...).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

812048 :

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Adapta-se aos banhos padrão com   | Largura interior maxi 59 cm             |
| Dimensões globais                 | Larg.54 x Prof. 72 cm x Hauteur 52,5 cm |
| Dimensões do assento              | Larg.41 cm x prof.41 x hauteur 36 cm    |
| Largura entre os apoios de braços | 46,5 centímetros                        |
| Altura do apoio de braço          | 39 centímetros                          |
| Estrutura                         | Aço                                     |
| Peso                              | 5 quilogramas                           |
| Peso máximo                       | 113 kg                                  |

812174 :

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Adapta-se aos banhos padrão com   | Largura interior maxi 59 cm                       |
| Dimensões globais                 | Largura 54 x profundidade 72 cm x altura 50 cm    |
| Dimensões do assento              | Largura 42 cm x profundidade 41 cm x altura 36 cm |
| Largura entre os apoios de braços | 49 centímetros                                    |
| Altura do apoio de braço          | 31 centímetros                                    |
| Estrutura                         | Aço   |
| Peso                              | 6,4 quilogramas                                   |
| Peso máximo                       | 113 quilogramas                                   |

## PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

## GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabricação, projeto ou material. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA Polo 49  
Bd de la Chanterie  
49124 São Bartolomeu d'ANJOU



Poids máxima autorisé **Peso**  
máximo autorizado **Peso**  
máximo permitido  
113 quilogramas

